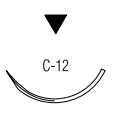
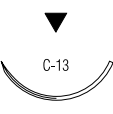
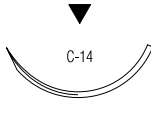
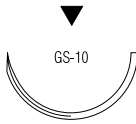
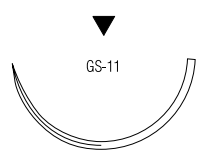
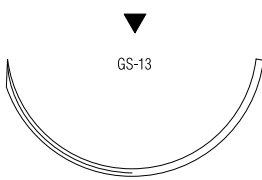
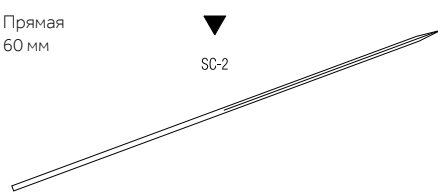
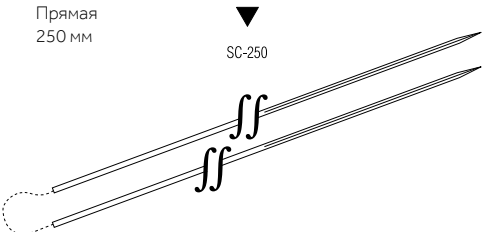


ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА	Синтетический рассасывающийся шовный материал Maxon™ и Maxon™ CV производится из полигликоната (кополимера гликолиевой кислоты и триметилен карбоната)
ПОКАЗАНИЯ	Синтетический рассасывающийся шовный материал Maxon™ и Maxon™ CV применяется для сопоставления тканей и/или для лигирования, включая использование в детской сердечно-сосудистой хирургии и в периферической сосудистой хирургии. Синтетический рассасывающийся шовный материал Maxon™ и Maxon™ CV не применяется во взрослой сердечно-сосудистой хирургии, офтальмохирургии, микрохирургии и на нервных тканях.
ПРИМЕНЕНИЕ	Синтетический рассасывающийся шовный материал Maxon™ и Maxon™ CV вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется. Прогрессирующая потеря прочности и окончательное рассасывание шовного материала Maxon™ и Maxon™ CV происходит путем гидролиза.
СРОК ПОДДЕРЖКИ РАНЫ	Проведенные исследования в области подкожной имплантации шовного материала Maxon™ и Maxon™ CV определили, что примерно 80% прочности сохраняется после первой недели имплантации шовного материала. Приблизительно 75% прочности сохраняется в первые 2 недели, 65% прочности – в течение 3 недель, 50% прочности сохраняется по истечению 4 недель, 25% прочности остается на 6-ю неделю после имплантации шовного материала.
СТЕРИЛИЗАЦИЯ	Окись этилена.
РАССАСЫВАНИЕ	Процесс рассасывания заканчивается на 180 день. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
УПАКОВКА	Стерильный шовный материал MAXON™ и MAXON™ CV производится различной длины, диаметра и с разным количеством в индивидуальной упаковке с иглами и без игл. Шовный материал MAXON™ CV выпускается в размерах от 4-0 до 7-0. Шовный материал MAXON™ и MAXON™ CV выпускается окрашенным в зеленый D&C цвет № 6. Шовный материал MAXON™ возможен в неокрашенном виде.

Обратно-режущая / Reverse Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
3/8 круга 16 мм 	4-0	1.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	8886611831	
3/8 круга 19 мм 	5-0	1	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	8886660821	
	4-0	1.5	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	8886660831	
	4-0	1.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	8886661231	
	4-0	1.5	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886663931	
	3-0	2	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	8886660841	
	3-0	2	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886663941	
3/8 круга 24 мм 	4-0	1.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	8886661831	
	3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	8886661841	
	3-0	2	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886664141	
	2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	8886661851	
	2-0	3	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886664151	
1/2 круга 26 мм 	3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	8886674441	
	2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	8886674451	
1/2 круга 37 мм 	2-0	3	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886675551	
	0	3.5	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886675561	
	1	4	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886675571	
1/2 круга 48 мм 	1	4	90	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886676971	
Прямая 60 мм 	4-0	1.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	8886690831	
	3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	8886690841	

Обратно-режущая / Reverse Cutting

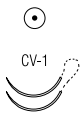
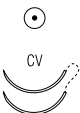
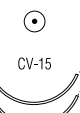
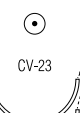
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
Прямая 250 мм 	2-0	3	75	ЗЕЛЁНЫЙ	12	8886639053

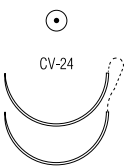
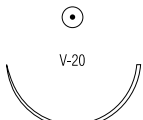
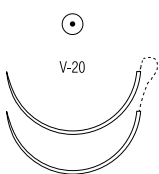
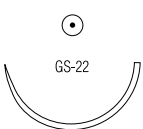
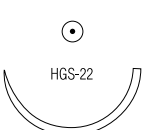
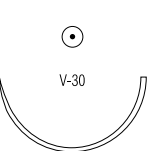
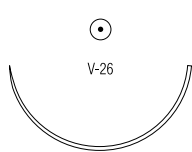
Косметическая обратно-режущая / Cosmetic Reverse Cutting

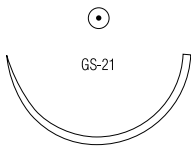
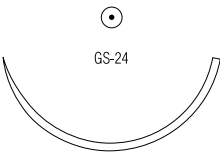
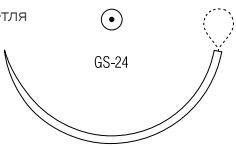
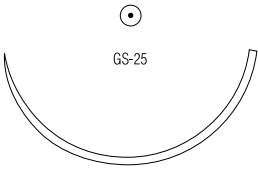
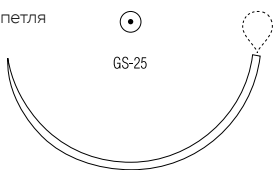
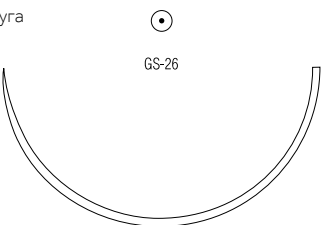
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 круга 11 мм 	6-0	0.7	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™ 8886653211
	5-0	1	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™ 8886653221
3/8 круга 13 мм 	6-0	0.7	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™ SMM-5516
	5-0	1	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™ SMM-5526
	4-0	1.5	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™ SMM-5536
3/8 круга 16 мм 	4-0	1.5	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™ SMM-5431
1/2 круга 19 мм 	4-0	1.5	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™ SMM-5043
	3-0	2	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™ SMM-5044

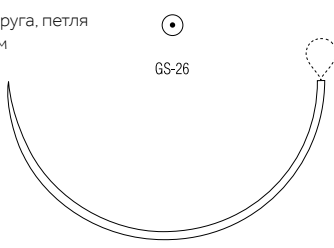
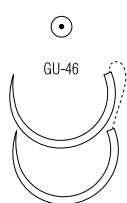
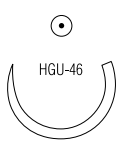
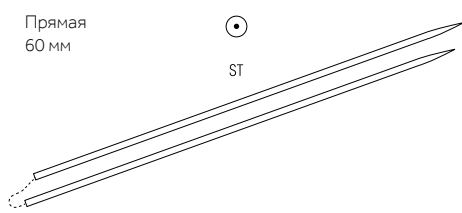
Шпатель/ Spatula

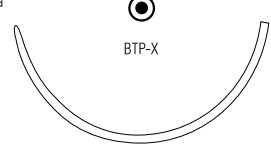
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 круга 8 мм 	7-0	0.5	45	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886662801
Кривизна 130° Длина иглы 6.49 мм Радиус 3.56 мм						

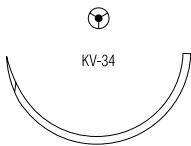
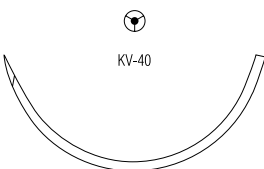
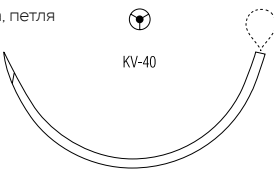
Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
3/8 круга 9 мм 	7-0	0.5	45	ЗЕЛЁНЫЙ	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™	8886614501
	7-0	0.5	60	ЗЕЛЁНЫЙ	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™	8886613901
	7-0	0.5	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™	8886612701
	6-0	0.7	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™	8886612711
3/8 круга 13 мм 	6-0	0.7	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™	8886614811
3/8 круга 13 мм 	6-0	0.7	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™	8886612411
	5-0	1	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™	8886612421
3/8 круга 17 мм 	4-0	1.5	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36		8886605731
3/8 круга 17 мм 	5-0	1	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™	8886646221
	4-0	1.5	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™	8886646231
1/2 круга 13 мм 	6-0	0.7	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	SURGALLOY™	8886621311
	5-0	1	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	SURGALLOY™	8886621321
1/2 круга 17 мм 	5-0	1	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	SURGALLOY™	8886620721
	4-0	1.5	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	SURGALLOY™	8886620731
	3-0	2	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	SURGALLOY™	8886620741
1/2 круга 17 мм 	5-0	1	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™	8886614921
	4-0	1.5	90	ЗЕЛЁНЫЙ	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™	8886613431

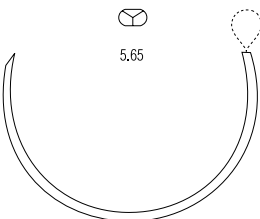
Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
1/2 круга 20 мм 	5-0	1	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886621721	
	4-0	1.5	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886621731	
	3-0	2	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886621741	
1/2 круга 20 мм 	4-0	1.5	90	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886622131	
	3-0	2	90	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886603641	
1/2 круга 26 мм 	4-0	1.5	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	SURGALLOY™	8886623331
	3-0	2	5x45	ЗЕЛЁНЫЙ	12	D-TACH™	8886622943
	3-0	2	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886623341	
	2-0	3	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	SURGALLOY™	8886623351
1/2 круга 26 мм 	4-0	1.5	90	ЗЕЛЁНЫЙ	36	SURGALLOY™	8886623531
	3-0	2	90	ЗЕЛЁНЫЙ	36	SURGALLOY™	8886623541
1/2 круга 27 мм 	2-0	3	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886624551	
	0	3.5	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886624561	
1/2 круга 27 мм Н 	0	3.5	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886624961	
1/2 круга 30 мм 	3-0	2	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886626141	
	2-0	3	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886626151	
	0	3.5	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886626161	
1/2 круга 37 мм 	3-0	2	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886625741	
	2-0	3	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886625751	
	0	3.5	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886625761	

Колющая / Taper Point							
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 круга 37 мм 	GS-21	2-0	3	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886626751
		0	3.5	90	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886626961
		1	4	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886626771
1/2 круга 40 мм 	GS-24	2-0	3	90	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886628751
		0	3.5	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886628561
		0	3.5	90	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886628761
		1	4	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886628571
		1	4	90	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886628771
1/2 круга, петля 40 мм 	GS-24	0	3.5	150	ЗЕЛЁНЫЙ	12	НИТЬ 150 CM, ПЕТЛЯ 75 CM GMM-563-L
		1	4	150	ЗЕЛЁНЫЙ	12	НИТЬ 150 CM, ПЕТЛЯ 75 CM GMM-573-L
1/2 круга 48 мм 	GS-25	0	3.5	90	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886630761
		1	4	90	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886630771
1/2 круга, петля 48 мм 	GS-25	0	3.5	150	ЗЕЛЁНЫЙ	12	НИТЬ 150 CM, ПЕТЛЯ 75 CM GMM-634-L
		1	4	150	ЗЕЛЁНЫЙ	12	НИТЬ 150 CM, ПЕТЛЯ 75 CM GMM-632-L
1/2 круга 65 мм 	GS-26	1	4	150	ЗЕЛЁНЫЙ	24	8886631972

Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
1/2 круга, петля 65 мм  GS-26	0	3.5	150	ЗЕЛЁНЫЙ	12	НИТЬ 150 CM, ПЕТЛЯ 75 CM	GMM-341-L
	0	3.5	240	ЗЕЛЁНЫЙ	12	НИТЬ 240 CM, ПЕТЛЯ 120 CM	GMM-343-L
	1	4	240	ЗЕЛЁНЫЙ	12	НИТЬ 240 CM, ПЕТЛЯ 120 CM	GMM-344-L
5/8 круга 27 мм  GU-46	2-0	3	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886640451	
5/8 круга 27 мм Н  HGU-46	0	3.5	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886645661	
	1	4	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886641971	
Прямая 60 мм  ST	3-0	2	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886623741	

Тупоконечная колющая / Blunt Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
1/2 круга 48 мм  BTP-X	1	4	150	ЗЕЛЁНЫЙ	12	НИТЬ 150 CM, ПЕТЛЯ 75 CM	GMMT-90-L

Колюще-режущая / Tapercutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
1/2 круга 37 мм 	0	3.5	90	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886627761	
1/2 круга, петля 40мм 	1	4	150	ЗЕЛЁНЫЙ	12	НИТЬ 150 CM, ПЕТЛЯ 75 CM	GMM-873-L
1/2 круга 48мм 	1	4	90	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886629571	
1/2 круга, петля 48мм 	0	3.5	150	ЗЕЛЁНЫЙ	12	НИТЬ 150 CM, ПЕТЛЯ 75 CM	GMM-806-L
	1	4	150	ЗЕЛЁНЫЙ	12	НИТЬ 150 CM, ПЕТЛЯ 75 CM	GMM-807-L

Многоцелевая / Multipurpose							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
5/8 круга 65 мм 	0	3.5	150	ЗЕЛЁНЫЙ	12	НИТЬ 150 CM, ПЕТЛЯ 75 CM	GMM-496-L
	1	4	180	ЗЕЛЁНЫЙ	12	НИТЬ 180 CM, ПЕТЛЯ 90 CM	GMM-497-L