

CAPROSYN™

МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ POLYGLYTONE™ 6211

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал Caprosyn™ изготавливается из синтетического полиэфира POLYGLYTONE™ 6211, который состоит из гликолида, капролактона, триметилен карбоната и лактида.

ПОКАЗАНИЯ

Синтетический рассасывающийся шовный материал Caprosyn™ предназначен для сопоставления тканей и/или для лигирования в общей, пластической и косметической хирургии, урологии и гинекологии. Применение в сердечно-сосудистой хирургии и на нейрохирургии, микрохирургии и офтальмологии не рекомендуется.

ПРИМЕНЕНИЕ

Синтетический рассасывающийся шовный материал Caprosyn™ вызывает минимальную острую воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется. Прогрессирующая потеря прочности и окончательное рассасывание шовного материала Caprosyn™ происходит путем гидролиза.

СРОК ПОДДЕРЖКИ РАНЫ

Проведенные исследования в области подкожной имплантации шовного материала Caprosyn™ определили, что минимум 50 – 60% прочности узла по USP и EP сохраняется в первые 5 дней и около 20 – 30% сохраняется по истечении 10 дней после имплантации шовного материала. Полная потеря прочности происходит к 21 дню после имплантации.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Окись этилена.

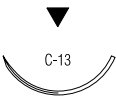
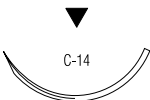
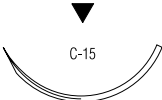
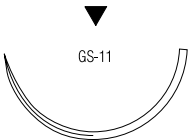
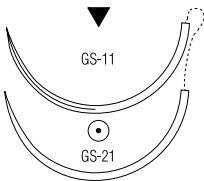
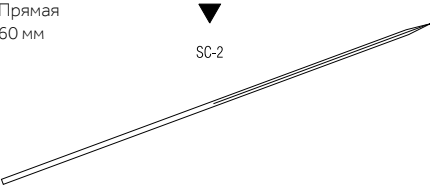
РАССАСЫВАНИЕ

Процесс рассасывания начинается, как потеря прочности без потери массы и заканчивается к 56 дню.
Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

УПАКОВКА

Шовный материал CAPROSYN™ производится в бесцветном варианте или окрашенными в фиолетовый D&C цвет № 2. Возможные варианты размеров от USP 1 (метрический размер 4) до 6-0 (метрический размер 0.7). Стерильный шовный материал поставляется в отрезках, катушках, безыгольном исполнении или с различными видами игл, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми. Формируется в коробках по 12, 24 и 36 шт.

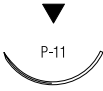
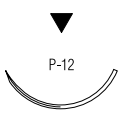
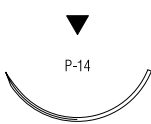
Без иглы / Non Needled							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
Отрезки стандартной длины	0	3.5	150	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	C-214	

Обратно-режущая / Reverse Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
3/8 круга 19 мм 	4-0	1.5	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SC-690-G	
	4-0	1.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SC-691	
	3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SC-692	
3/8 круга 24 мм 	3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SC-693-G	
3/8 круга 26 мм 	3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SC-587	
	2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SC-586	
1/2 круга 37 мм 	2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CC-543	
1/2 круга 37 мм 	2-0	3	150	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CC-983	
Прямая 60 мм 	4-0	1.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SC-644	
	3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SC-643	

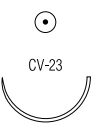
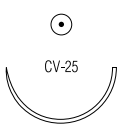
CAPROSYN™

МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ POLYGLYTONE™ 6211

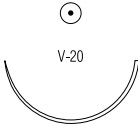
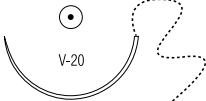
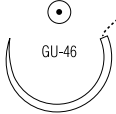
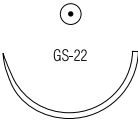
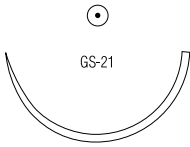
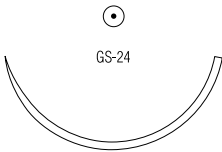
Косметическая обратно-режущая / Cosmetic Reverse Cutting

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 круга 11 мм 	6-0	0.7	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ SC-3625-G
	5-0	1	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ SC-3626-G
3/8 круга 13 мм 	6-0	0.7	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ SC-5688-G
	5-0	1	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ SC-5689-G
	5-0	1	45	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	SURGALLOY™ SC-5587-G
	4-0	1.5	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ SC-5690-G
	4-0	1.5	45	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	SURGALLOY™ SC-5590-G
3/8 круга 16 мм 	4-0	1.5	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ SC-5686-G
3/8 круга 19 мм 	5-0	1	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ SC-5616-G
	4-0	1.5	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ SC-5617-G
	4-0	1.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ SC-5637-G
	3-0	2	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ SC-5618-G
	3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ SC-5638-G
3/8 круга 24 мм 	4-0	1.5	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™ SC-5679
	4-0	1.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™ SC-5779
	3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ SC-5780-G

Колющая / Taper Point

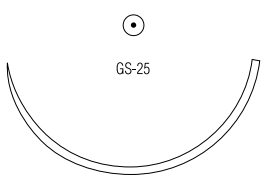
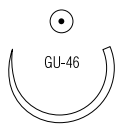
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 круга 17 мм 	5-0	1	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™ UC-202
	4-0	1.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™ UC-203
1/2 круга 22 мм 	4-0	1.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™ UC-403
	3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™ UC-404

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOF™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И EP ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

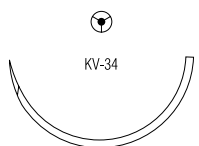
Колющая / Taper Point							
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 круга 22 мм		2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	UC-863
1/2 круга 26 мм		4-0	1.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™ GC-121
		4-0	1.5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SURGALLOY™ GC-321
		3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™ GC-122
		3-0	2	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SURGALLOY™ GC-322
		2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™ GC-123
		2-0	3	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SURGALLOY™ GC-323
		0	3.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	GC-124
1/2 круга 26 мм 5/8 круга 27 мм		2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CC-558
		2-0	3	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CC-658
1/2 круга 27 мм							
1/2 круга 27 мм		2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CC-883
		2-0	3	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CC-830
		0	3.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CC-884
		1	4	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CC-885
1/2 круга 37 мм		3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CC-810
		2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CC-811
		2-0	3	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CC-923
		0	3.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CC-812
		0	3.5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CC-844
		0	3.5	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CC-924
		1	4	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CC-813
		1	4	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CC-845
		1	4	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CC-925
1/2 круга 40 мм		2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CC-801
		2-0	3	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CC-915
		0	3.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CC-802
		0	3.5	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CC-913
		1	4	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CC-803
		1	4	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CC-914

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOFT™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И ЕР ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

Колющая / Taper Point

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 круга 48 мм 	0	3.5	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CC-904
	1	4	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CC-905
5/8 круга 27 мм 	2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	UC-978

Колюще-режущая / Tapercutting

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 круга 37 мм 	2-0	3	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	CC-1945-G

Косметическая режущая / Cosmetic Conventional Cutting

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 круга 13 мм 	5-0	1	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	XC-834
3/8 круга 16 мм 	5-0	1	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	XC-844
	4-0	1.5	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	XC-845
3/8 круга 19 мм 	4-0	1.5	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	XC-823

