

SOFSILK™

ПЛЕТЁНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ПОКРЫТЫЙ ШЁЛК

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Шовный материал Sof silk™ представляет собой нерассасывающийся, стерильный, немутагенный хирургический шовный материал, состоящий из натуральных белковых шёлковых волокон - фиброин. Этот белок получают от одомашненных гусениц тутового шелкопряда Bombyx mori семейства Bombycidae. Для получения хирургического шовного материала SOFSILK™ шёлковые волокна обрабатываются для удаления серициновой смазки, отбеливаются, сплетаются. Плетёные нити равномерно покрываются силиконом или особой восковой рецептурой для снижения капиллярности и увеличения смачиваемости, обеспечивающей оптимальные манипуляционные свойства, плавное прохождение через ткани и опускание узла.

ПОКАЗАНИЯ

Шовный материал Sof silk™ предназначен для сопоставления тканей и/или для лигирования, применения в общей, торакальной, сердечно-сосудистой хирургии, офтальмологии, ортопедии и нейрохирургии.

ПРИМЕНЕНИЕ

Шовный материал Sof silk™ вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется.

СРОК ПОДДЕРЖКИ РАНЫ

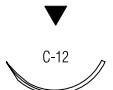
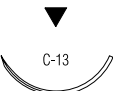
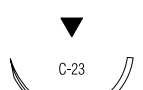
Шовный материал Sof silk™ является нерассасывающимся. Деградация протеиновых волокон шелка in vivo может приводить к частичной потере прочности шовного материала со временем.

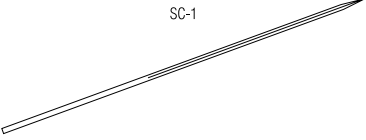
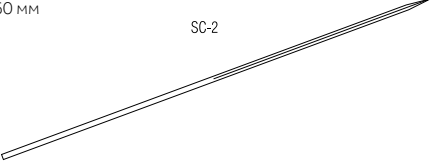
СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Гамма облучение.

УПАКОВКА:

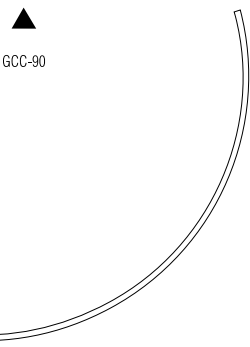
Шовный материал Sof silk™ выпускается белым или окрашенным в черный цвет и покрыт или силиконом, или специальной восковой рецептурой, размерами от 2 (метрический размер 5) до 8-0 (метрический размер 0.4). Стерильный шовный материал Sof silk™ поставляется с различными видами игл, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми. Формируется в коробках по 12,24 или 36 шт.

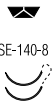
Обратно-режущая / Reverse Cutting								
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
3/8 круга 12 мм		5-0	1	45	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	S-1173
3/8 круга 16 мм		6-0	0.7	45	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ СИЛИКОНОМ	SS-681
		5-0	1	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-673
		4-0	1.5	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-645
		3-0	2	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-745
3/8 круга 19 мм		5-0	1	45	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-682
		5-0	1	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-652
		4-0	1.5	45	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-683
		3-0	2	45	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-694
		3-0	2	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-654
		0	3.5	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-656
3/8 круга 24 мм		4-0	1.5	45	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-629
		3-0	2	45	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-684
		2-0	3	45	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-695
		2-0	3	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-785
3/8 круга 26 мм		2-0	3	45	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-685
3/8 круга 30 мм		3-0	2	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-675
		2-0	3	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-679
		0	3.5	45	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-678
		0	3.5	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-680
		1	4	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-689
3/8 круга 39 мм		2-0	3	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-648
		0	3.5	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-647
		1	4	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-646
		2	5	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-651
1/2 круга 24 мм		3-0	2	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-632
		2-0	3	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-633

Обратно-режущая / Reverse Cutting							
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
Прямая 51 мм		2-0	3	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ SS-523
Прямая 60 мм		2-0	3	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ SS-623
		2-0	3	100	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ SS-723
		0	3.5	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ SS-624

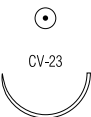
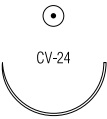
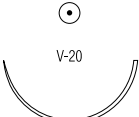
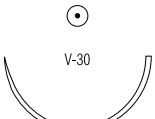
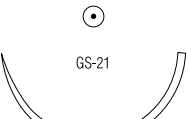
Косметическая обратно-режущая / Cosmetic Reverse Cutting							
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 круга 11 мм		6-0	0.7	45	ЧЁРНЫЙ	36	SURGALLOY™ ПОКРЫТИЕ СИЛИКОНОМ SS-5639
3/8 круга 13 мм		5-0	1	45	ЧЁРНЫЙ	36	SURGALLOY™ ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ SS-5640

Премиум обратно-режущая / Premium Point Reverse Cutting							
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 круга 13 мм		4-0	1.5	45	ЧЁРНЫЙ	12	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ S-1789-K
Кривизна 130° Длина иглы 10.37 мм Радиус 5.72 мм							

Режущая / Conventional Cutting							
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 круга 90 мм		2-0	3	100	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ CS-791
		0	3.5	100	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ CS-792
		1	4	100	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ CS-793

Премиум шпатель / Premium Spatula							
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 круга 6 мм		8-0	0.4	45	ЧЁРНЫЙ	12	SURGALLOY™ ПОКРЫТИЕ СИЛИКОНОМ S-1734-K
Кривизна 135° Длина иглы 4.80 мм Радиус 2.60 мм Микрон 200							

Колющая / Taper Point							
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 круга 9 мм		7-0	0.5	45	ЧЁРНЫЙ	36	SURGALLOY™ ПОКРЫТИЕ СИЛИКОНОМ VS-809
3/8 круга 13 мм		6-0	0.7	75	ЧЁРНЫЙ	36	SURGALLOY™ ПОКРЫТИЕ СИЛИКОНОМ VS-889
		5-0	1	75	ЧЁРНЫЙ	36	SURGALLOY™ ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ VS-890
3/8 круга 17 мм		4-0	1.5	75	ЧЁРНЫЙ	36	SURGALLOY™ ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ VS-881
		3-0	2	75	ЧЁРНЫЙ	36	SURGALLOY™ ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ VS-882

Колющая / Taper Point								
	Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
1/2 круга 17 мм		4-0	1.5	75	ЧЁРНЫЙ	36	SURGALLOY™ ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	VS-871
		3-0	2	75	ЧЁРНЫЙ	36	SURGALLOY™ ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	VS-872
1/2 круга 20 мм		4-0	1.5	75	ЧЁРНЫЙ	36	SURGALLOY™ ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	GS-451
		3-0	2	75	ЧЁРНЫЙ	36	SURGALLOY™ ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	GS-452
1/2 круга 26 мм		3-0	2	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	GS-832
		2-0	3	5x45	ЧЁРНЫЙ	24	D-TACH™ ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	GS-62-M
		2-0	3	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	GS-833
		0	3.5	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	GS-834
1/2 круга 30 мм		3-0	2	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	GS-822
		2-0	3	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	GS-823
		0	3.5	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	GS-824
1/2 круга 37 мм		0	3.5	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	VS-844
		1	4	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	VS-845
		2	5	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	VS-846
1/2 круга 37 мм		2-0	3	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	CS-423
		0	3.5	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	CS-424
1/2 круга 40 мм		2	5	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	CS-575

