

Полуавтоматический эндоскопический многозарядный клиппликатор, обеспечивающий наложение средне-больших клипс при использовании с троакаром XCEL 5 мм*


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Клипсы:

- V-образная форма;
- длина закрытой клипсы: 8,8 мм;
- апертура открытой клипсы: 3,6 мм;
- тип закрытия клипс: дистальный;
- материал: титан;
- поперечные и продольные насечки на внутренней поверхности клипс;
- предназначены для использования у одного пациента.

Клиппликаторы:

- длина клиппликаторов: 33 см;
- изогнутые складывающиеся пассивные бранши;
- храповый механизм для надежного удерживания клипсы в браншах;
- количество клипс в аппарате: 15;
- блокировка аппарата после использования последней клипсы;
- ротация ствола: 360°;
- предназначены для использования у одного пациента.

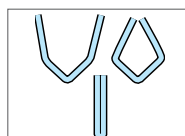

Надежная фиксация на сосудах благодаря наличию насечек на внутренней поверхности клипс



НАДЕЖНОЕ ЛИГИРОВАНИЕ:

- клипсы надежно удерживаются на сосудах или протоках благодаря наличию продольных и поперечных насечек на внутренней поверхности клипс;
- атравматичность и хорошая визуализация достигается за счет изогнутых закругленных браншей;
- блокировка аппарата после использования последней клипсы препятствует повреждению сосуда.

ГИБКОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- пассивные бранши складываются при прохождении через троакар, что обеспечивает использование средне-больших клипс в 5-миллиметровом троакаре XCEL;
- храповый механизм позволяет надежно удерживать клипсу в браншах и перемещать ее по сосуду;
- дистальный тип закрытия клипс дает возможность неполного закрытия клипсы на сосудах для ее перемещения и точного позиционирования во время операции;
- тактильный и звуковой контроль закрытия клипсы на сосудах;
- полуавтоматическая подача клипсы в бранши и индикатор оставшихся в аппликаторе клипс позволяет легко контролировать расход во время операции.

™ Лигамакс

КЛИППЛИКАТОР LIGAMAX МНОГОЗАРЯДНЫЙ

КОД	ОПИСАНИЕ	ДИАМЕТР СТВОЛА КЛИППЛИКАТОРА	ДЛИНА СТВОЛА	АПЕРТУРА ОТКРЫТОЙ КЛИПСЫ	ДЛИНА ЗАКРЫТОЙ КЛИПСЫ	КОЛ-ВО КЛИПС	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
EL5ML	СРЕДНЕ-БОЛЬШИЕ КЛИПСЫ	5,5 мм	33 см	3,6 мм	8,8 мм	15	3

* Полное наименование в соответствии с РУ: Клиппликатор эндоскопический LIGAMAX.
РУ № РЗН 2016/4586. Товар сертифицирован.

ETHICON

Johnson & Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES*

TV-ART-06342 v1.0

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

