


6 моделей многоразовых эндоскопических клиппаппликаторов и 3 размера титановых клипс Ligaclip® (Лигаклип*) обеспечивают надежное лигирование сосудов различного диаметра

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Клипсы:

- V-образная форма;
- длина закрытой клипсы: 5,0 мм, 8,7 мм, 12,0 мм;
- апертура открытой клипсы: 3,0 мм, 5,5 мм, 8,0 мм;
- тип закрытия клипс: дистальный;
- материал: титан;
- поперечные и продольные насечки на внутренней поверхности клипс;
- насечки на внешней поверхности клипс.

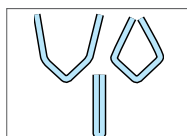

Надежная фиксация на сосуде благодаря наличию насечек на внутренней поверхности клипс

Клиппаппликаторы:

- угол изгиба рабочей части: 15° (EL); 0 градусов (LC);
- бранши: одна активная (EL), обе активные (LC);
- вращение ствола: 360°;
- возможность разобрать аппарат: нет (EL); наличие (LC).

НАДЕЖНОЕ ЛИГИРОВАНИЕ:

- клипсы надежно удерживаются на сосуде или протоке благодаря наличию продольных и поперечных насечек на внутренней поверхности клипс;
- атравматичность и хорошая визуализация достигается за счет изогнутых закругленных браншей.

ГИБКОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- клипсы легко захватываются из кассеты и надежно удерживаются в браншах без дополнительного давления на рукоять клиппаппликатора благодаря конкордатным насечкам на внутренней поверхности браншей и внешней поверхности клипс;
- дистальный тип закрытия клипс дает возможность неполного закрытия клипсы на сосуде для ее перемещения и точного позиционирования во время операции;
- каждый размер имеет свою цветовую маркировку (LC) – одинаковую для клипс (упаковка) и аппликаторов (ручки аппликатора).

КЛИПСЫ LIGACLIP						КЛИППАППЛИКАТОРЫ LIGACLIP ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МНОГОРАЗОВЫЕ		
КОД	ОПИСАНИЕ	АПЕРТУРА ОТКРЫТОЙ КЛИПСЫ	ДЛИНА ЗАКРЫТОЙ КЛИПСЫ	КОЛ-ВО КЛИПС В КАССЕТЕ	КОЛ-ВО КАССЕТ В УПАКОВКЕ	КОД	ДИАМЕТР СТВОЛА	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
LT200	СРЕДНИЕ	3,0 мм	5,0 мм	6	36	LC2010Z	10 мм	1
						EL214	10 мм	1
LT300	СРЕДНЕ-БОЛЬШИЕ	5,5 мм	8,7 мм	6	18	LC3010Z	10 мм	1
						EL314	10 мм	1
LT400	БОЛЬШИЕ	8,0 мм	12,0 мм	6	18	LC4010Z	10 мм	1
						EL414	10 мм	1

* Полное наименование в соответствии с РУ: Клипсонакладыватель хирургический LIGACLIP для открытой и эндоскопической хирургии с принадлежностями. РУ № ФСЗ 2008/02843. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

