

Meril

Endo Surgery

Meril Endo Surgery

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



MHRS

Meril Hernia Repair Solutions
Решения Meril для герниопластики

СОДЕРЖАНИЕ

ЗНАКОМСТВО С MERIL.....	1
 ВЕНТРАЛЬНАЯ ГРЫЖА (Неадгезивная Сетка)	
Сетка Merineum	5
 УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФИКСАЦИИ СЕТКИ	
Profound A.....	9
Profound N	13
 ПАХОВАЯ ГРЫЖА И ВЕНТРАЛЬНАЯ ГРЫЖА (ОТКРЫТАЯ ХИРУРГИЯ)	
Сетка Filaprop	11
Мягкая сетка Filaprop	13
Merigrow	15
Absomesh	17

Meril

Компания Meril, работающая на рынке с 2007 года, является мировым производителем медицинских изделий и расположена в Вапи, штат Гуджарат, Индия, в 150 км к северу от Мумбаи. Компания Meril была создана в рамках стратегии диверсификации в сфере здравоохранения группы компаний Bilakhia. Сегодня компания Meril — это глобальная медицинская компания (поставки осуществляются в более чем 150 стран мира), деятельность которой направлена на разработку инновационных, клинически значимых, высокотехнологичных и лучших на рынке изделий, позволяющих облегчить страдания пациентов и улучшить качество их жизни. Операционная деятельность компании Meril охватывает широкий спектр направлений: сосудистые вмешательства, лечение структурных аномалий сердца, ортопедия, роботизированная хирургия, эндохирургия, ЛОР и лабораторная диагностика in vitro (IVD).

В компании Meril мы неизменно стремимся к внедрению передовых решений в области здравоохранения, чтобы позволить многим пациентам прожить длинную и здоровую жизнь. Ради этого мы уделяем большое внимание НИОКР и неукоснительно соблюдаем стандарты качества в производстве, клинических исследованиях, обучении и развитии для всех заинтересованных сторон.



ИЗЛЕЧИМ ГРЫЖИ!

Если можно работать через прокол,
зачем делать разрез?

Двухслойная неадгезивная сетка:
оптимизированная конструкция для прочности и
эффективности



MERINEUMTM MESH

Сетка из полипропилена / полилактид-капролактона



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Лапароскопическая герниопластика
вентральной грыжи
- Герниопластика
послеоперационной грыжи
- Герниопластика
пупочной грыжи

СИНИЕ ЛИНИИ

- Помогают идентифицировать сетку при лапароскопических операциях
- Упрощают ориентацию сетки

ОПТИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ

- Обеспечивает своевременное дренирование сером
- Способствует росту фибробластов
- Упрощает наложение трансфасциальных швов

ПРОЗРАЧНЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ПРОТИВОСПАЕЧНЫЙ БАРЬЕР

- Улучшенная визуализация подлежащего дефекта
- Прочный барьер — повышенная устойчивость к повреждениям при проведении через троакар
- Защита от образования спаек в критический период
- Барьер из ПЛКЛ рассасывается в течение 90–120 дней



Уникальные особенности МНОЖЕСТВО ПРЕИМУЩЕСТВ


Дренажные отверстия



Синие линии

Рассасывающаяся мягкая защитная мембрана

Увеличенный барьер 5 мм для предотвращения спаек с тканями

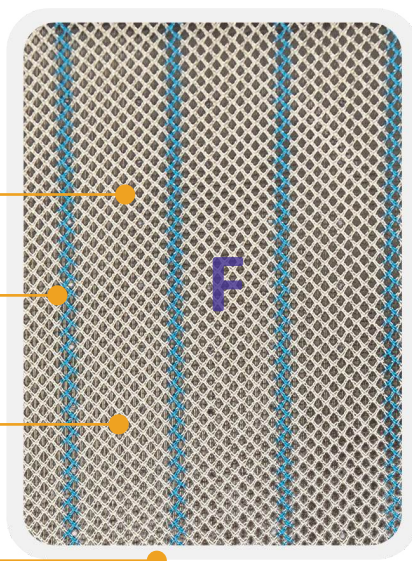

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес (до рассасывания ПЛКЛ)	150 - 170 г/м ²
Вес (после рассасывания ПЛКЛ)	52 - 64 г/м ²
Размер пор	1,5 x 2,0 мм
Толщина	0,5 - 0,6 мм
Прочность на разрыв	Не менее 300 Н
Метод стерилизации	Гамма-излучение

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

№	Код изделия	Форма	Описание
1	TSM715RE		7,6 см × 15 см, Прямоугольная
2	TSM10150V		10 см × 15 см, Овальная
3	TSM1515SQ		15 см × 15 см, Квадратная
4	TSM1520RE		15 см × 20 см, Прямоугольная
5	TSM15200V		15 см × 20 см, Овальная
6	TSM20250V		20 см × 25 см, Овальная



Композитная сетка из полилактид-капролактона для герниопластики ventральных грыж: проспективное рандомизированное односторонне слепое контролируемое исследование. Шэнь Ю.М., Ли Ц., Чэнь Дж., Сунь Л., Чэнь Ф.Ц.

Сравнение пленки на основе капролактона/лактида с двумя изделиями из полилактидной пленки в качестве барьера для послеоперационных перидуральных спаек на овечьей модели дорсальной ламинэктомии. Лиза С. Клопп, Брюс Дж. Саймон, Джейми М. Буш, Марк Эннс.

Надежный захват и проникновение в ткань для обеспечения фиксации под разными углами



PROFOUND™ A

Рассасывающееся устройство для фиксации сетки из полилактид-ко-гликолида, 5 мм, для лапароскопической герниопластики.



Диаметр трубки $5,50 \pm 0,2$ мм

Длина трубки 360 ± 5 мм



Высота скобы
 $5,16 \pm 0,15$ мм



Диаметр скобы
 $5,00 \pm 0,15$ мм




ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ УМЕНЬШЕНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА

- Фиксация сетки может сопровождаться болями после операции, возможно, вследствие защемления нерва.
- Рассасывающееся устройство фиксации PROFOUND™ A, обеспечивает пациентам потенциальное уменьшение болевого синдрома.

НАДЕЖНОСТЬ - ДОСТИГНУТА


Надежность обеспечивается конструкцией, способом установки и легко различимым цветом. Более длинный шип по сравнению с «золотым стандартом» — нерассасывающимся устройством фиксации.

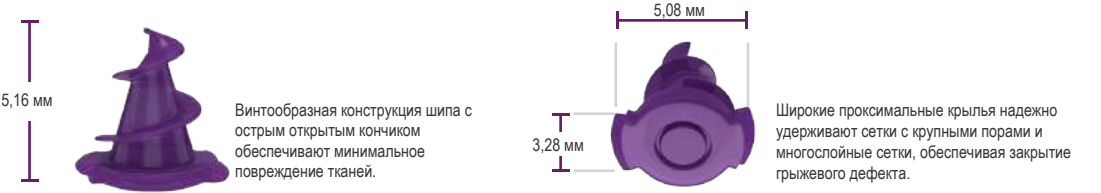

ОПТМАЛЬНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ - ДОСТИГНУТА Фиолетовый шип

Специально разработана для обеспечения оптимальной визуализации во время операции

БЕЗОПАСНОСТЬ - ДОСТИГНУТА Безыгольная фиксация

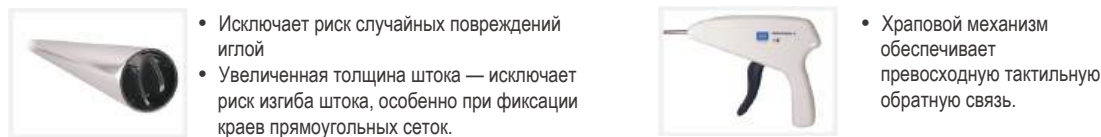

БОЛЬШАЯ ЦЕННОСТЬ - ДОСТИГНУТА Больше шипов — больше возможностей выбора



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

№	Код изделия	Торговая марка	ОПИСАНИЕ
1	MFD 15A	PROFOUND™ A	PLGA — РАССАСЫВАЮЩИЕСЯ (15)
2	MFD 30A	PROFOUND™ A	PLGA — РАССАСЫВАЮЩИЕСЯ (30)




Решения для реконструкции передней брюшной стенки



СЕТКА FILAPROP™

Полипропиленовая сетка

Стандартная нерассасывающаяся полипропиленовая сетка

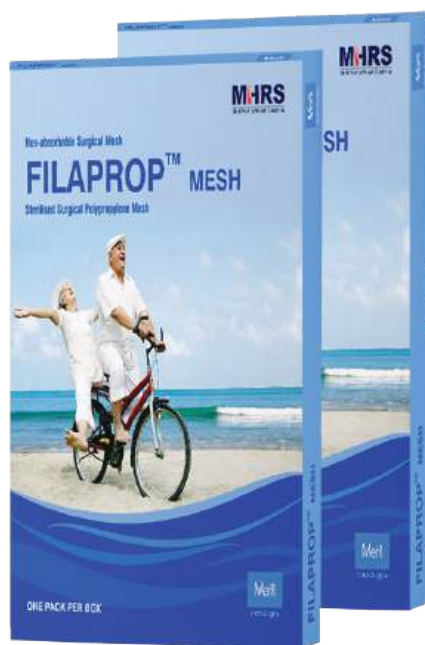

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Открытая герниопластика
- Дефекты фасций
- Лапароскопическая герниопластика

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Большой размер пор способствует формированию эластичного рубца.
- Высокая прочность на разрыв для надежного закрытия дефекта.
- Сетка Filaprop мягкая, эластичная и гибкая, что способствует нормальному процессу заживления раны

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес	80 -100 г/м ²
Размер пор	1,0 × 1,5 мм
Толщина	0,495–0,605 мм
Прочность на разрыв	Не менее 9 кг/см ²
Метод стерилизации	Этиленоксид

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

№	Код изделия	Торговая марка	Описание
1	PPM510	СЕТКА FILAPROP	ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ СЕТКА (5 CM × 10 CM)
2	PPM611	СЕТКА FILAPROP	ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ СЕТКА (6 CM × 11 CM)
3	PPM715	СЕТКА FILAPROP	ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ СЕТКА (7,6 CM × 15 CM)
4	PPM1015	СЕТКА FILAPROP	ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ СЕТКА (10 CM × 15 CM)
5	PPM1215	СЕТКА FILAPROP	ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ СЕТКА (12 CM × 15 CM)
6	PPM1218	СЕТКА FILAPROP	ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ СЕТКА (12 CM × 18 CM)
7	PPM1515	СЕТКА FILAPROP	ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ СЕТКА (15 CM × 15 CM)
8	PPM1520	СЕТКА FILAPROP	ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ СЕТКА (15 CM × 20 CM)
9	PPM1530	СЕТКА FILAPROP	ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ СЕТКА (15 CM × 30 CM)
10	PPM3030	СЕТКА FILAPROP	ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ СЕТКА (30 CM × 30 CM)